




neodisher® MediKlar special



Oplachový prostředek pro strojové zpracování termostabilních a termolabilních nástrojů

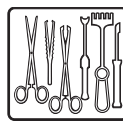

Tekutý koncentrát

Oblast použití:

- Závěrečný oplach zdravotnických prostředků, jako chirurgických nástrojů včetně oftalmologických, anesteziologických pomůcek, nástrojových kontejnerů, implantátů a kojeneckých lahví, v mycích a dezinfekčních zařízeních
- Leštění koster lůžek ve velkokapacitních dekontaminačních zařízeních, které se podle údajů výrobce mohou zpracovávat strojově

Spektrum účinků:

- Velmi dobré smáčecí vlastnosti, i na těžko smáčivých plastových površích
- Pro rychle schnutí zpracovávaného materiálu bez pruhů
- Při použití přípravku neodisher MediKlar special v souladu s určením není ovlivněna biokompatibilita zpracovávaných nástrojů (biologické hodnocení zdravotnických prostředků podle EN ISO 10993-1)
- Na součástech příslušenství anesteziologických pomůcek z polysulfonu (PSU) a polyfenylensulfonu (PPSU), např. konektorech laryngeálních masek, ventilech, adaptérech a součástech vík nástrojových kontejnerů, se při kontaktu s oplachovými prostředky mohou kvůli výrobně daným vlastnostem tvořit praskliny z pnutí. U nich je třeba vždy předem ověřit slučitelnost

Speciální vlastnosti:

- Výrazně zkracuje dobu schnutí
- Neutralizuje zavlčené zbytky zásad
- Při použití změkčené vody při závěrečném oplachu redukuje tvorbu skvrn

Použití a dávkování:

neodisher MediKlar special se používá v mycích a dezinfekčních zařízeních a velkokapacitních dekontaminačních zařízeních. Dávkovací množství závisí mj. na oblasti použití, mytých předmětech a kvalitě vody. Při použití přípravku neodisher MediKlar special je třeba dodržovat následující parametry:

- Pro závěrečný oplach chirurgických nástrojů, anesteziologických pomůcek, nástrojových kontejnerů, implantátů a kojeneckých lahví: 0,2–0,4 ml/l
- Pro závěrečný oplach koster lůžek: 0,2–0,8 ml/l

Mycí a dezinfekční zařízení, velkokapacitní dekontaminační zařízení a dávkovací systémy musí být pro použití přípravku neodisher MediKlar special vhodné.

Obecné pokyny k použití:

- Pouze pro průmyslové použití.
- Nesměšujte s jinými přípravky.
- Před změnou přípravku propláchněte dávkovací systém včetně sacích hadic vodou.
- Zpracování musí probíhat v souladu s legislativou pro zdravotnické prostředky a platnými předpisy za použití vhodných validovaných postupů.
- Dodržujte prosím doporučení výrobce zdravotnického prostředku pro zpracování v souladu s požadavky normy DIN EN ISO 17664, doporučení výrobců koster lůžek pro zpracování a doporučení pracovní skupiny pro dekontaminační zařízení koster lůžek a vozíků (AK-BWA) v aktuálním vydání brožury AK-BWA



neodisher® MediKlar special

„Maschinelle Dekontamination“ (Strojová dekontaminace).

- Je třeba dodržovat návody k obsluze výrobců mycích a dezinfekčních zařízení.

Technické údaje:

Hodnota pH	4,0–3,5 (0,2–0,8 ml/l, stanoveno v demineralizované vodě, 20 °C)
Viskozita	< 50 mPa·s (koncentrát, 20 °C)
Hustota	cca 1,05 g/cm ³ (20 °C)

Složení:

Obsažené látky pro čisticí prostředky podle nařízení ES č. 648/2004 o detergitech:


< 5 % fosfonátů,
15–30 % neiontových tenzidů,
kromě toho konzervanty
(methylchlorisothiazolinon/
methylisothiazolinon)

Označení CE:

neodisher MediKlar special splňuje požadavky vyplývající z evropské legislativy pro zdravotnické prostředky.

Pokud dojde k závažnému incidentu s tímto výrobkem, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.

Pokyny pro skladování:

Skladujte při teplotě od 0 do 30 °C. Při správném skladování lze uchovávat po dobu 3 let. Použití do: viz údaj na štítku za symbolem .

Informace o nebezpečnosti a bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace a údaje o ochraně životního prostředí najdete v bezpečnostních listech. Jsou dostupné na stránkách www.drweigert.de v sekci „Service/Downloads“.

Likvidujte pouze prázdné a uzavřené obaly.
Likvidace zbytků přípravku: viz bezpečnostní list.

MB 4073/3-2
Stav: 07/2020

Distributor v ČR:

BMT Medical Technology s.r.o.

Čejl 157/50, 602 00 Brno | +420 545 537 111 | mail@bmt.cz | www.bmt.cz

Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. To však nezbavuje uživatele povinnosti provádět vlastní testy a zkoušky. Ani z něj nelze vyvodit právně závazné ujštění o určitých vlastnostech.