

Specialisté na výrobky pro monitorování sterilizace

Firma Albert Browne Ltd. byla založena v roce 1870 a zabývala se výrobou zdravotnických pomůcek, ale teprve ve 30. letech vyvinula první chemický indikátor pro sterilizaci, známou Brownho trubičku. Tento výrobek měl být počátkem výzkumného programu, který udržuje firmu Browne v čele technologie na poli monitorování sterilizace. Firma Albert Browne Ltd. získala od British Standards Institute certifikát řízení jakosti BS ISO9001, který je mezinárodním standardem pro vývoj a výrobu. Výrobky firmy Browne jsou vyvýjeny tak, aby splňovaly všechny platné technické požadavky, ať národní, evropské nebo mezinárodní.



Firma Browne je hrdá, že vám může nabídnout nejvyšší kvalitu a nejúplnější sortiment indikátorů sterilizace. Pověst našich služeb a podpory je nepřekonatelná a věříme, že je životně důležitá v takovém oboru, jako je ochrana veřejného zdraví.

Máte-li jakékoliv dotazy na naše výrobky nebo si je přejete vyzkoušet nebo hledáte výrobek zde neuvedený, obraťte se laskavě na distributora, jehož adresa je uvedena níže.



Technologií k jistotě

Browne International

Oakendene Estate, Bolney Road
Cowfold, Sussex RH13 8AZ England

Telephone: +44 1403 864534

Faxsimile: +44 1403 864864

E-mail: browne.int@compuserve.com
Web: www.thebrownegroup.co.uk

Dováží:
MEDPLAN spol. s r. o.



Dodává:

BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 50, 656 60 BRNO
tel.: +420 545 537 355
fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz.cz
http://www.bmt.cz

Výrobce, vystavující na trh své zdrojové produkty, si vyhrazuje právo provádět, i bez předchozího ohlášení, změny v materiálech, rozměrech a provedení, které v souladu s vlastní okolnostmi lze provádět za mimořádnou potřebu, přičemž zákazníci musejí povolenou zástavu za potřebu oddělen od toho, které si stojí za. Výrobci, dodavatelé a popisy jsou jen všeobecným vodítkem a mají současně jedno smyslovné nebo významové, pokud to není jasné, určitě tak, jak to dovoluje technika taktu.

Systém Browne

Výrobky pro kontrolu sterilizace a desinfekce



Již více než 60 let je firma Browne v čele oboru kontroly sterilizace.

Firma Browne ukázala cestu ve vývoji revoluční chemické technologie pro monitorování sterilizačních a desinfekčních procesů. Od počátku určuje standardy, kterými jsou posuzovány všechny ostatní na tomto poli...

...Posuzování Vám...

Proč užívat testy sterilizace? Používání přesných a spolehlivých chemických indikátorů v každém sterilizačním cyklu pomůže významně zvýšit úroveň Vašeho systému řízení jakosti. Nedávno objevení nových virů a multiresistentních kmenů již známých mikroorganismů znamená, že je více než kdykoliv dříve důležité zajistit dosažení kritických parametrů sterilizace stanovených pro jejich zničení.

Od Vás se požaduje, abyste Vy i vaše zařízení každodenně poskytovali spolehlivé a kvalitní služby všem uživatelům sterilního materiálu, kteří před jeho použitím očekávají, že nemůže být příčinou ohrožení pacienta. Nejvyšší jistotu docílíte vložením indikátoru do každého balení sterilizovaného materiálu.

Firma Browne dodává kompletní řadu výrobků pro kontrolu sterilizace i desinfekce.

Sterilizace se skládá ze tří samostatných částí,



Čištění/desinfekce



Sterilizace




Dokumentace

Pro usnadnění výběru správného výrobku firmy Browne používá moderní systém jejich identifikace spolu s prospekty, technickými buletiny a výukovými pomůckami, které Vám pomohou vybrat správný výrobek splňující Vaše požadavky na kontrolu.



Technologií k jistotě

TST jednorázový balíček pro Bowie-Dickovu zkoušku

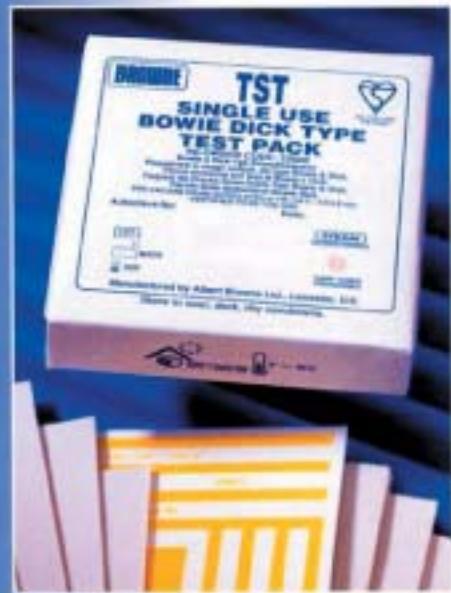

Při sterilizaci, jež součástí je odstranění zbytkového vzduchu z výrobku, musí být prováděna zkouška pronikavosti páry (CSN EN 554) na počátku každého pracovního dne.

Browne TST jednorázový balíček pro B-D zkoušku je svého druhu nejdokonalejším testem pronikavosti páry dostupným na světovém trhu.

- Indikátorový systém TST je diagnostickým prostředkem, který urychlí zjištění závady i opravu sterilizátoru. Sleduje i kvalitu páry včetně obsahu nekondenzujících plynů. Tím se ušetří čas i peníze.

- Browne TST jednorázový balíček pro B-D zkoušku je prvním takovým prostředkem ověřeným nezávislou zkušební laboratoří již podle nové normy EN 867-4. To je důkazem spl-

nění nejpřísnějších standardů, pro Vaši naprostou jistotu.

Pro přípravu balíku pro standardní B-D zkoušku se dodávají rovněž bezolovnaté indikátorové listy formátu A4 a speciální bavlněné roušky (viz ČSN EN 285 odst. 26.1.)



TST Control™ - Indikátory pro kontrolu parního sterilizačního cyklu

TST indikátory Browne pro parní sterilizaci jsou kalibrovány podle nejnáročnějších a nejpřísnějších kritérií stanovených v ISO 11140-1.

- Jsou ideální k monitorování každého cyklu.
- Přispívají k vyššímu stupni spolehlivosti sterilizace.
- Jasná barevná změna ze žluté na modrou se snadno hodnotí.



Viceparametrové MVI indikátory pro parní sterilizaci

Cenově výhodné indikátory využívající patentovanou technologii bezolovnatého barviva.

Jsou vhodné pro všechny parní sterilizátory pracující v rozsahu teplot 120 °C až 140 °C. Monitorují čas, teplotu i kvalitu páry.

Odpovidají Třídě D podle normy ČSN EN 867-1 a Třídě 4 podle normy ISO 11140 pro chemické indikátory.



Indikátory pro chemickou sterilizaci

Široký sortiment indikátorů Třidy A i Třidy D vhodných pro rutinní monitorování sterilizace:

- Ethylenoxidem
- Formaldehydem
- Plasmou




Biologické indikátory


Sortiment biologických indikátorů obsahuje zapožďené biologické indikátory s kultivačním médiem i proužky s nanesenými spórami a spórové suspenze pro sterilizaci:

- Parou
- Suchým teplom
- Formaldehydem
- Ethylenoxidem
- Gamma zářením

Odpovídají normám ČSN EN i ISO.

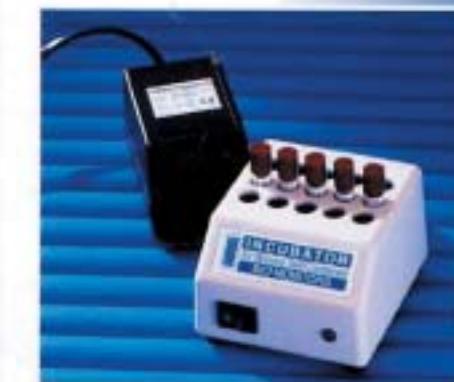

Ostatní produkty dodávané firmou Browne

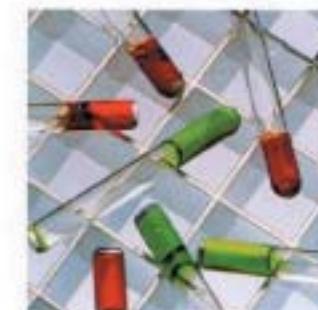

Kontrolní trubičky

Kontrolní trubičky umožňují vůbec nejpřesnější monitorování sterilizace suchým teplom dle vyhlášky č. 440/2000 Sb. v rozsahu teplot 160 °C až 180 °C a kontrolu sterilizace v tzv. nástrojových vařičích PS 50.



Test kvality mytí

Test pro kontrolu mytí fáze desinfekčního procesu v nástrojových automatach.

Tento test je ekvivalentem tzv. Edinburgh Soil Test.



Procesové indikátory

Lepicí pásky různých šírek s indikátory pro sterilizaci parou, suchým teplom a ethylenoxidem. Rovněž lepicí pásky pro parní sterilizaci bez indikátorů.

Samolepicí terčíky pro sterilizaci ethylenoxidem, formaldehydem a Gamma zářením.



Dokumentační systém

Samolepicí etikety s procesovým indikátorem pro parní sterilizaci a etiketovací kleště pro vyznačení dat sterilizace a expirace, čísla sterilizátoru a šarže i čísla pracovníka, který sterilizaci prováděl. Etikety lze snadno snímat pro vložení do dokumentace o použití sterilizovaného materiálu. Lze dodat i speciální provedené etikety.